

# Puradisc RC / Puradisc H-PTFE 시린지 필터

cytiva  
Whatman

시료 오염 없는  
HPLC 분석용 최적의 제품

## RC

(Regenerated Cellulose)




**매우 낮은 용출**

low extractables

시료 오염 최소화!

다른 재질에 비해 시료 오염이 적어  
HPLC 검출 시 타 제품에 비해 매우  
우수한 결과 값을 제공합니다.

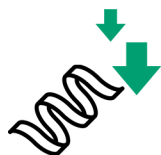

**매우 낮은 단백질 결합**

low protein binding

생물 시료의 단백질 회수에도 적합  
단백질 회수율이 매우 높아,  
일반 화학 실험 뿐만 아니라  
생물 시료 또는 단백질 회수에도  
적합합니다.



우수한 내화학성과 친수성 재질로  
대부분의 일반적인 HPLC 용매에  
사용 가능합니다.

시료에 구애받지 않는  
최고의 내화학성

## H-PTFE

(Hydrophilic-Polytetrafluoroethylene)



**최고의 내화학성**

chemical resistant

내화학성이 매우 뛰어나  
모든 용매에 사용 가능

내화학성이 가장 뛰어난 PTFE 재질로써  
산, 염기, 유기 용매 등의 반응성이 강한  
물질에도 사용 가능합니다.



**친수성**

hydrophilic

수용액과 유기 용매 모두 사용 가능

일반적인 PTFE 재질과 달리 친수성 성질로  
물이 포함된 용액의 여과가 가능해  
재질 구분이 필요 없습니다.



용출도가 낮아  
분석용 시료 전처리에도 우수합니다

| 크기(mm) | 공극(μm) | 재질        |           | 판매 단위  |
|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|        |        | RC        | H-PTFE    |        |
| 13     | 0.2    | 6756-1302 | 6772-1302 | 100/pk |
|        | 0.45   | 6756-1304 | 6772-1304 |        |
| 25     | 0.2    | 6756-2502 | 6772-2502 | 50/pk  |
|        | 0.45   | 6756-2504 | 6772-2504 |        |



# 고품질 시린지 필터 제품군

## Puradisc



- 가장 많이 사용되는 Whatman 대표 제품
- 4, 13, 25, 30mm 및 PVDF, PTFE, Nylon, PP, PES, RC, CA, GMF 등의 다양한 재질 및 멸균, 튜브 팁 등의 옵션으로 각 시료와 실험에 가장 적합한 제품 선택 가능

## GD/X



- 4중 필터 구조로 입자가 많거나 점성이 있어 여과가 힘든 시료용
- 멤브레인의 상층부에 많은 입자를 거르도록 유리 필터를 추가하여 적은 힘으로도 최대 7배까지 많은 양을 여과 가능

## ÄKTA



- ÄKTA 장비 용 시료 전처리를 위한 제품
- 불필요한 입자들을 제거하여 장비 손상 방지와 컬럼의 수명 증가
- 단백질 흡착이 낮아 시료 회수율이 높음

## Mini-UniPrep



- HPLC 분석용 시료가 많을 때 시간 절약이 가능한 매우 편리한 제품
- 주사기/필터/바이알/캡을 하나로 통합
- 시료를 담고 누르면 전처리 완료 및 별도로 시료를 옮겨 담을 필요 없이 바로 분석
- Pre-slit 과 amber 바이알 옵션 선택 가능

| 제품                                         | 직경 (mm) | 공극 (μm) | PVDF                       | PTFE (소수성)                 | H-PTFE (친수성) | Nylon                      | PP                       | RC         | PES (멸균)  |
|--------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Puradisc                                   | 4       | 0.2     | 6779-0402                  | 6784-0402                  | -            | 6789-0402                  | -                        | -          | -         |
|                                            |         | 0.45    | 6779-0404                  | 6784-0404                  | -            | 6789-0404                  | -                        | -          | -         |
|                                            | 13      | 0.1     | -                          | 6784-1301                  | -            | 6789-1301                  | -                        | -          | -         |
|                                            |         | 0.2     | 6779-1302                  | 6784-1302                  | 6772-1302    | 6789-1302                  | 6788-1302                | 6756-1302  | 6780-1302 |
|                                            |         | 0.45    | 6779-1304                  | 6784-1304                  | 6772-1304    | 6789-1304                  | 6788-1304                | 6756-1304  | 6780-1304 |
|                                            |         | 1.0     | -                          | 6784-1310                  | -            | -                          | -                        | -          | -         |
|                                            | 25      | 0.1     | -                          | 6784-2501                  | -            | -                          | -                        | -          | -         |
|                                            |         | 0.2     | 6746-2502                  | 6784-2502                  | 6772-2502    | 6750-2502                  | 6786-2502                | 6756-2502  | 6780-2502 |
|                                            |         | 0.45    | 6746-2504                  | 6784-2504                  | 6772-2504    | 6750-2504                  | 6786-2504                | 6756-2504  | 6780-2504 |
|                                            |         | 1.0     | -                          | 6784-2510                  | -            | 6750-2510                  | -                        | -          | 6780-2510 |
| GD/X                                       | 25      | 0.2     | 6872-2502                  | 6874-2502                  | -            | 6870-2502                  | 6878-2502                | 6887-2502  | 6896-2502 |
|                                            |         | 0.45    | 6872-2504                  | 6874-2504                  | -            | 6870-2504                  | 6878-2504                | 6882-2504  | 6896-2504 |
| ÄKTA                                       | 13      | 0.2     | -                          | -                          | -            | -                          | -                        | 10463103   | -         |
|                                            |         | 0.45    | -                          | -                          | -            | -                          | -                        | 10463113   | -         |
|                                            | 30      | 0.2     | -                          | -                          | -            | -                          | -                        | 10463043   | -         |
|                                            |         | 0.45    | -                          | -                          | -            | -                          | -                        | 10463033   | -         |
| Mini-UniPrep (PP 바이알)<br>(US: pre-slit)    | 0.2     | 0.2     | UN203NPEAQU<br>US203NPEAQU | UN203NPEORG<br>US203NPEORG | -            | UN203NPENYL<br>US203NPENYL | UN203NPEPP<br>US203NPEPP | UN203NPERC | -         |
|                                            |         | 0.45    | UN203NPUAQU<br>US203NPUAQU | UN203NPUORG<br>US203NPUORG | -            | UN203NPUNYL<br>US203NPUNYL | UN203NPUPP<br>US203NPUPP | UN203NPURC | -         |
| Mini-UniPrep G2 (유리 바이알)<br>(GS: pre-slit) | 0.2     | 0.2     | GN203NPEAQU<br>GS203NPEAQU | GN203NPEORG<br>GS203NPEORG | -            | GN203NPENYL<br>GS203NPENYL | GN203NPEPP<br>GS203NPEPP | GN203NPERC | -         |
|                                            |         | 0.45    | GN203NPUAQU<br>GS203NPUAQU | GN203NPUORG<br>GS203NPUORG | -            | -                          | -                        | GN203NPURC | -         |

## HENKE-JECT® **잠깐!** 고품질 시린지 필터에 일반 주사기를 사용하시나요?



일반 주사기의 경우 고무팁이나 실리콘 오일 등이 용매에 녹아 분석 시료를 오염시킬 수 있습니다. HENKE-JECT 주사기는 전체 플라스틱 제품으로 일반 고무 팁 주사기보다 용매에 강해 Whatman 시린지 필터와 함께 사용하면 제대로 된 고품질의 시료 전처리가 가능합니다.



### 지역 판매처

**강원** (주)바이오토프 T. 033) 262-9807

**광주/전남** (주)동양과학 T. 062) 523-7891

**포항** 에덴테크 T. 054) 292-8222

**수원/인천** 그린텍 T. 031) 227-1961

**부산/경남** 영동과학 T. 051) 255-9481

**창원** 유현하이텍(주) T. 055) 277-5675

**충북** 충북과학(주) T. 043) 234-6200

**전주** (유)엘케이바이오텍 T. 063) 242-1603